

## So wechseln Sie die Batterie Ihres Hörgeräts

Ihrem Hörgerät ist der Saft ausgegangen? Nun muss eine neue Energiequelle her. Sie müssen die Batterie wechseln. Wahrscheinlich hat Ihnen Ihr [Hörgeräteakustiker](#) das schon einmal ganz genau gezeigt. Aber gerne erklären wir Ihnen noch einmal, wie das bei den allermeisten der weitverbreiteten Hinter-dem-Ohr-Geräten funktioniert.

### 1. Öffnen Sie die Batterieklappe



An den meisten Hörgeräten gibt es eine Kerbe, in die Sie mit dem Fingernagel einrasten können, um das Batteriefach leicht zu öffnen. Das funktioniert oft auch als Ein- und Ausschalter.


### 2. Klappen Sie das Batteriefach ganz heraus



Klappen Sie das Batteriefach so weit heraus, dass Sie die ganze Batterie sehen können.

**3. Blicken Sie auf die Bodenseite der Batterie**

**4. Drücken Sie die Batterie mit einem spitzen, aber nicht scharfen Gegenstand heraus.**

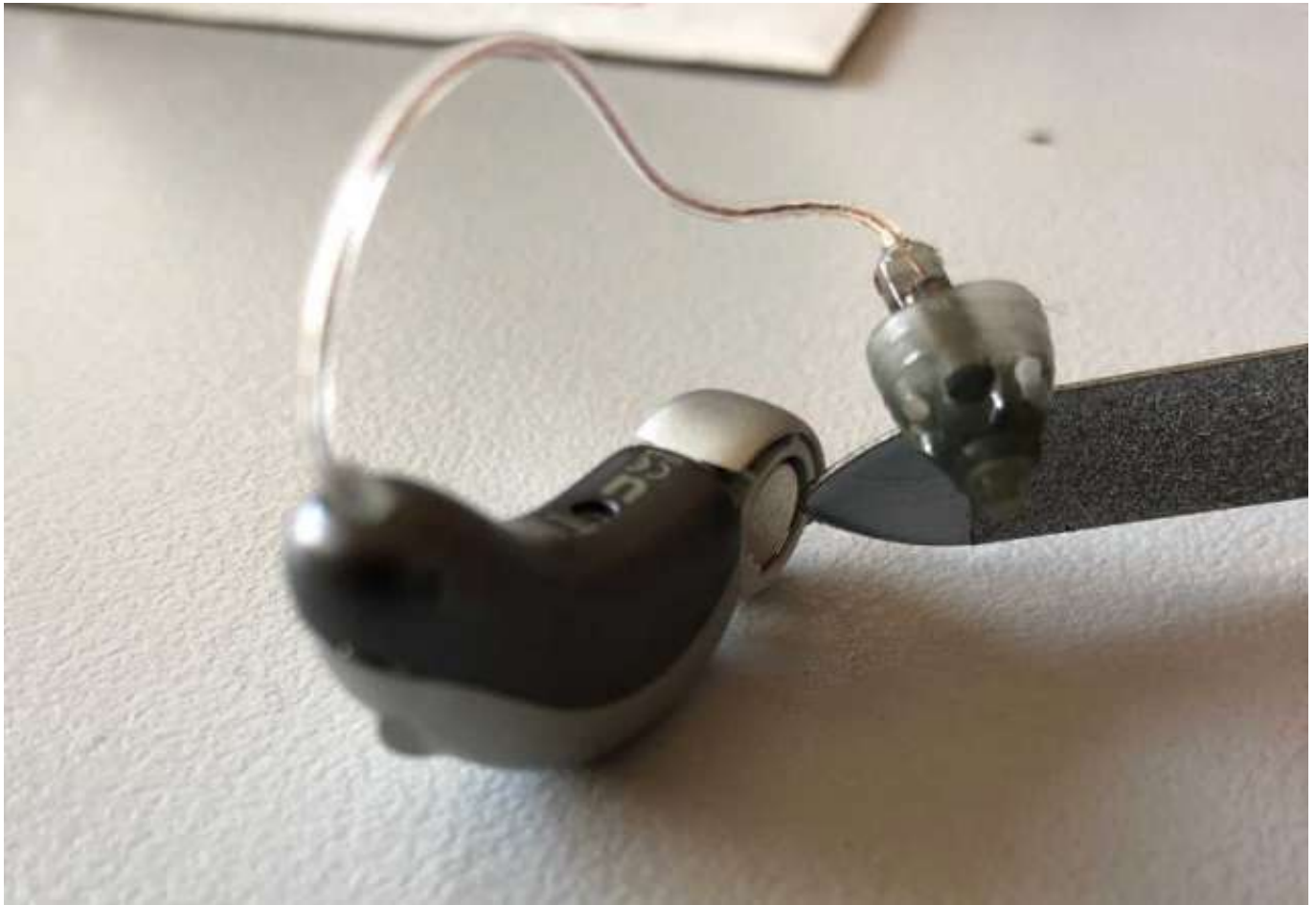

Das muss ganz leicht gehen. Von der Bodenseite heraus ausdrücken.  
Sie können auch falls vorhanden den Ex-Hörer zum Herausstippen der Batterie verwenden:



**5. Entfernen Sie von einer neuen Zink-Luft-Batterie den Aufkleber**



**6. Warten Sie 10 Sekunden**

**7. Setzen Sie dann die neue Batterie ein, so wie die alte im Gerät saß**





**8. Klappen Sie das Batteriefach wieder ein und drücken Sie es komplett zu, um das Hörgerät einzuschalten**



Das ist ganz kinderleicht.

Wenn Sie immer noch nicht damit klar kommen, besuchen Sie bitte Ihren [Hörakustiker](#), damit der Ihnen beim Batteriewechsel behilflich ist. Er wird Ihnen auch gerne noch einmal erklären, wie das bei Ihrem Hörgerät genau funktioniert.

Erfahrene Hörgeräteträger mögen mit der Stirn runzeln und diesen Beitrag für banal halten. Aber bitte bedenken Sie, dass jeden Tag neue Hörgeräteträger entstehen. Außerdem gibt es Pflegekräfte und Angehörige, die das jetzt für jemanden machen müssen, der es bislang immer ganz alleine gemacht hat.

Die alte Batterie entsorgen Sie bitte über Batterieabgabestellen, die sich überall dort befinden, wo auch [Batterien](#) verkauft werden, beispielsweise im Elektrogeschäft und bei Supermärkten und den Discountern ALDI, LIDL & Co.

[Batterien](#) für Hörgeräte sind besonders leistungsfähig. Verwenden Sie nur [Batterien](#) von dem Typ, den Ihr Hörgerät benötigt. Versuchen Sie niemals [Batterien](#) einer anderen Größe ins Hörgerät einzusetzen. Bewegen Sie die Batterieklappe immer vorsichtig. Ihr Gelenk ist ein neuralgischer Punkt.